


One Minute Wonder

Pin - Pflege

Die Pflege der Pins beim Fixateur externe ist essenziell, da jeder Metallstab – auch Pin genannt – eine direkte Verbindung zum Knocheninneren darstellt. Dies schafft potenziell große Eintrittspforten für Keime und erhöht das Risiko einer Pin-Track-Infektion.

Benötigte Materialien:

- ✓ Handschuhe
- ✓ Flächendesinfektionsmittel
- ✓ Schutzunterlage
- ✓ Sterile Kompressen
- ✓ Bauchtücher
- ✓ Octenisept
- ✓ ggf. NaCl 0,9%
- ✓ Sterile Pinzette & Pflaster

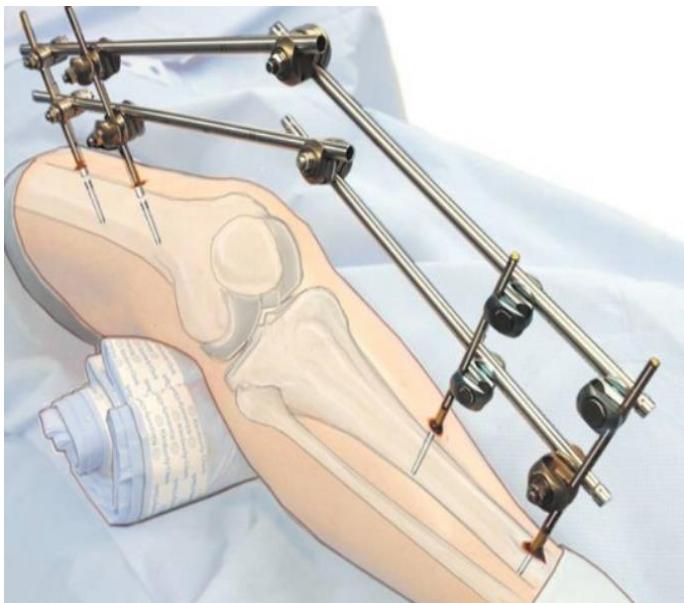

Durchführung

Vorbereitung

- ✓ **Patient informieren & Arbeitsplatz vorbereiten:**
 - Sichtschutz, Abwurf & Flächendesinfektion
- ✓ **Hygiene & Materialien:**
 - Händedesinfektion
 - Handschuhe anziehen
 - Schutzunterlage unter den betroffenen Bereich legen
 - Verband entfernen (ggf. mit NaCl 0,9 % Octenisept lösen)
 - Handschuhwechsel & erneute Händedesinfektion

Reinigung der Pin-Stellen

- ✓ **Sterile Kompressen mit Octenisept tränken**
- ✓ **Nach aseptischer Regel reinigen:**
 - In eine Richtung wischen
 - Tupfer nach einmaligem Gebrauch verwerfen
- ✓ **Mindestens 2 Tupfer pro Pin verwenden**
- ✓ **Einwirkzeit: mind. 1 Minute**
- ✓ **Quergestänge auf die gleiche Weise reinigen**
- ✓ **Handschuhwechsel & erneute Händedesinfektion**

Abschluss & Wundversorgung

- ✓ **Pins trocknen & verbinden:**
 - Mit Bauchtüchern und leichtem Druck
 - Alternativ: Sterilen Kompressen umwickeln & mit Pflaster fixieren
- ✓ **Materialien entsorgen & Arbeitsbereich desinfizieren**

⚠ Wichtig: Geöffnete **Sterilprodukte nicht** für weitere Verbände verwenden!

Häufigkeit der Durchführung:

In der **Regel alle 2 Tage**, bei durchnässten Verbänden **sofort** wechseln.

Quergestänge: Mindestens **alle 3 Tage**, bei sichtbarer Verschmutzung **sofort** reinigen.

Quelle:

I care – Pflege (ISBN 978-3-132-41828-8)

POP – Praxisorientiert Pflegen (ISBN 978-3-662-62672-6)

EvKB, Orgavision, Verfahrensanweisung Pinpflege UC, S. Döberl, D. Dannenberg, 13.03.2023